

UNTERSTÜTZT DIE NATÜRLICHE ANULUS- BEWEGUNG



SimuPlus™
Anuloplastie-Ring und -Band



Medtronic

EINFACHE IMPLANTATION

Geflochtenes Polyestermaterial

- Widersteht Dehnung und minimiert Faltenbildung
- Ermöglicht widerstandsarmes, gleichmäßiges Einstechen der Nadel entlang der gesamten Breite von Ring und Band.

Gut sichtbare Marker

- Trigon- und Mittellinien-Posterior-Marker unterstützen eine präzise Nahtplatzierung und Ring/Band-Positionierung.

Verschiedene Größen

- SimuPlus-Ringe und -Bänder sind in den Größen 26-42 mm erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

SimuPlus Anuloplastie-Ring

Ermöglicht die physiologische Bewegung

- Stabilisiert den Anulus, ohne zu versteifen.
- Stützt die posterioren und anterioren Teile des Anulus, wenn Flexibilität erforderlich ist.



SimuPlus Anuloplastie-Band

Erlaubt feste trigonale Verankerung


- Die Länge und Größe des Bandes sind an die Trigone angepasst; das Band bietet eine vollständige posteriore Unterstützung um den Anulus-Umfang.
- Stützt den posterioren Teil des Anulus.



VERBESSERUNGEN DES ZUBEHÖRS


Offener Halter mit niedrigem Profil

Nähte entlang des gesamten flexiblen Rings oder Bands bei vollständigem Zugang platzieren.

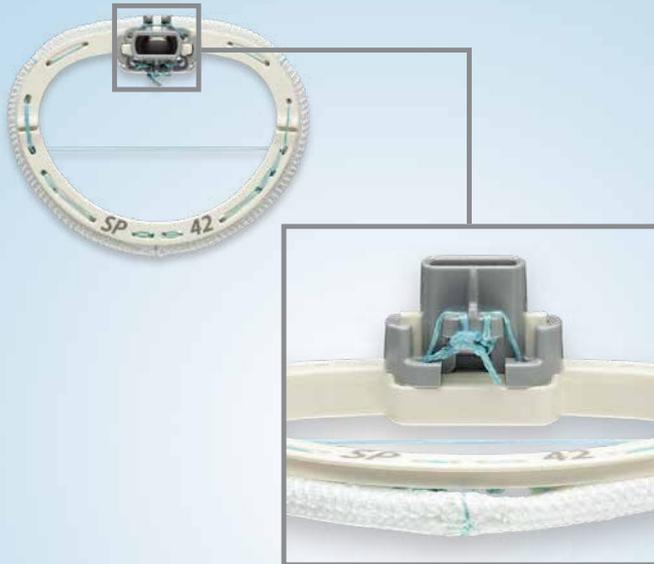


Deutliche Schnittmarkierungen

Einfaches Erkennen der beiden Schnittmarkierungen am Halter, was ein schnelles Lösen des Rings ermöglicht.

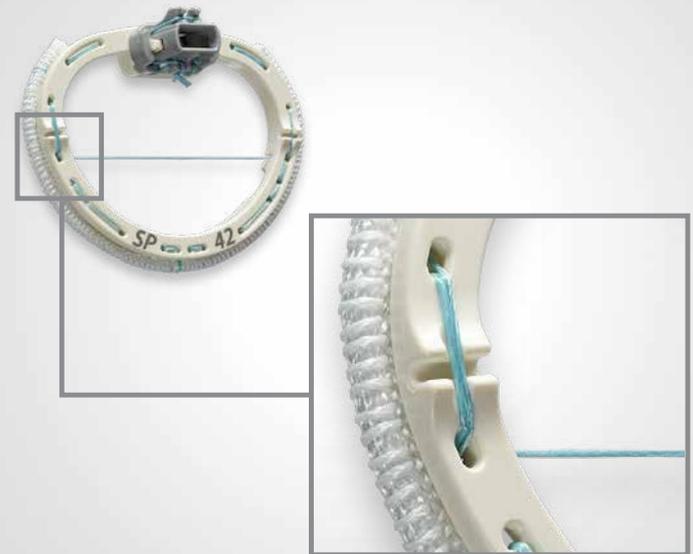


Stabile Griff-Halter- Verbindung

Ermöglicht das Lösen des Halters mit geringem
Kraftaufwand durch einen Schnitt, der Ring bleibt während
des Nähens sicher befestigt.

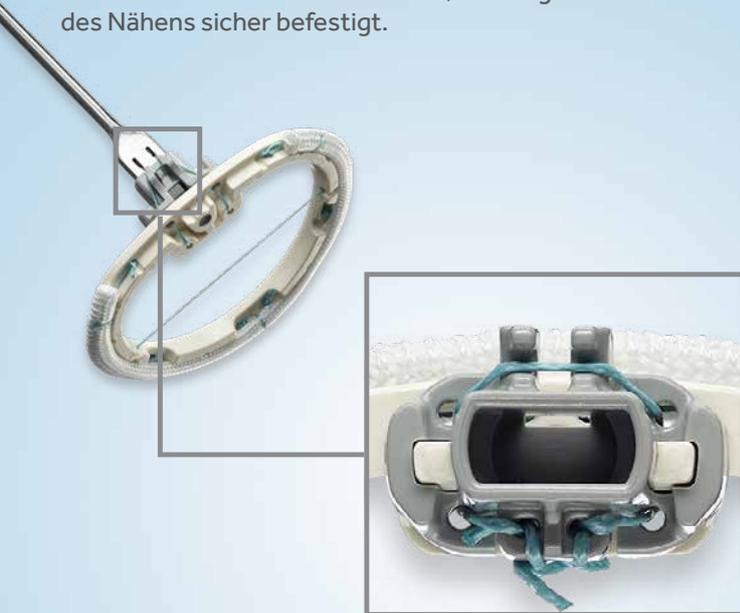


Visuelle Referenzlinie der Chordae

Bietet eine visuelle Referenz der Anulus-Ebene bei der
Durchführung von Chordae-Rekonstruktionen.

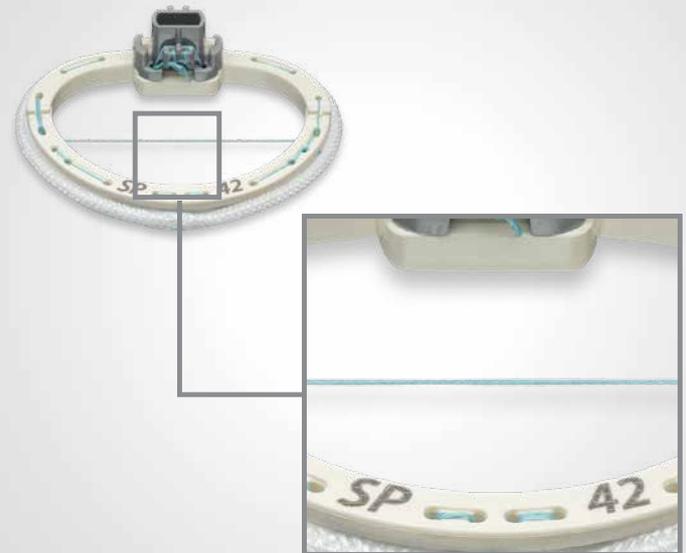


SIMUPLUS-BAND PRODUKTINFORMATIONEN

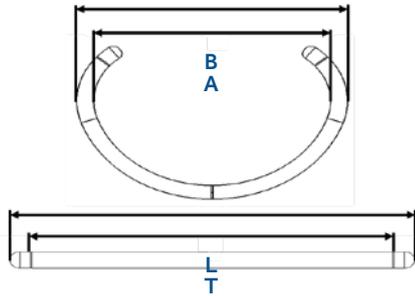

- A:** Band-Innendurchmesser
- B:** Band-Außendurchmesser
- T:** Intertrigonale Länge
- L:** Band-Gesamtlänge

Größe (mm)	Produktcodes	„A“ (mm)	„B“ (mm) mit 3-mm-Band	„T“ (mm)	„L“ (mm)
26	7700FB26	26	32	53	59
28	7700FB28	28	34	57	63
30	7700FB30	30	36	61	67
32	7700FB32	32	38	65	73
34	7700FB34	34	40	69	77
36	7700FB36	36	42	73	81
38	7700FB38	38	44	77	85
40	7700FB40	40	46	81,3	91,3
42	7700FB42	42	48	85	93

SIMUPLUS-RING PRODUKTINFORMATIONEN

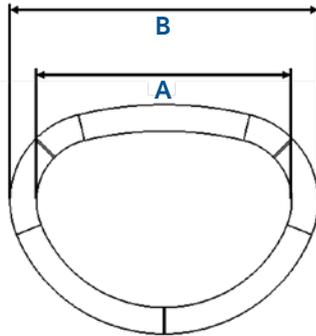

- A:** Band-Innendurchmesser
- B:** Band-Außendurchmesser

Größe (mm)	Produktcodes	„A“ (mm)	„B“ (mm) mit 3-mm-Ring
26	7700FR26	26	32
28	7700FR28	28	34
30	7700FR30	30	36
32	7700FR32	32	38
34	7700FR34	34	40
36	7700FR36	36	42
38	7700FR38	38	44
40	7700FR40	40	46
42	7700FR42	42	48

SIMUPLUS-BAND BESTELLINFORMATIONEN

Bestellnummer	Komponenten und Zubehör
T7700P	Zubehörschale für SimuPlus Sizer aus Polysulfon
T7700F	Zubehörschale für SimuPlus Sizer aus flexiblem Silikon
7700PS	Set aus 9 SimuPlus Sizern aus Polysulfon
7700FS	Set aus 9 SimuPlus Sizern aus Silikon
7686 7686L 7686XL	Anuloplastie-Handgriffe in folgenden Längen: 216 mm, 254 mm, 373 mm

SIMUPLUS-RING BESTELLINFORMATIONEN

Bestellnummer	Komponenten und Zubehör
T7700P	Zubehörschale für SimuPlus Sizer aus Polysulfon
T7700F	Zubehörschale für SimuPlus Sizer aus flexiblem Silikon
7700PS	Set aus 9 SimuPlus Sizern aus Polysulfon
7700FS	Set aus 9 SimuPlus Sizern aus Silikon
7686 7686L 7686XL	Anuloplastie-Handgriffe in folgenden Längen: 216 mm, 254 mm, 373 mm



SimuPlus™

Zubehörschale für Sizer aus flexiblem Silikon

Detaillierte Informationen über die Gebrauchsanweisung, Implantationsverfahren, Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und mögliche Komplikationen sind dem Produkthandbuch zu entnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Medtronic Repräsentanten und/oder auf der Medtronic Website unter www.medtronic.eu.

Informationen zu den jeweiligen Produkten finden Sie in den Gebrauchsanweisungen unter www.medtronic.com/manuals.

Handbücher können unter Verwendung der aktuellen Version eines gängigen Internet-Browsers eingesehen werden.

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie den Adobe Acrobat® Reader zusammen mit dem Browser.

Diese Information ist nur für Benutzer in Märkten bestimmt, in denen Medtronic Produkte und Therapien zugelassen oder zur Verwendung verfügbar sind, wie in den jeweiligen Produkthandbüchern angegeben. Der Inhalt bestimmter Medtronic Produkte und Therapien ist nicht für Benutzer in Märkten bestimmt, die keine Berechtigung zur Verwendung haben.

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Telefon: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

Deutschland

Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
DE-40670 Meerbusch
deutschland@medtronic.com
www.medtronic.de
Telefon: +49 (0)2159 81 49 0
Telefax: +49 (0)2159 81 49 100

Österreich

Medtronic Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96
AT-1200 Wien
vienna@medtronic.com
www.medtronic.at
Telefon: +43 (0)1 240 44 0
Telefax: +43 (0)1 240 44 100

Schweiz

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Telefon: +41 (0)31 868 01 00
Telefax: +41 (0)31 868 01 99

UC202100243aDE © Medtronic 2021.
Alle Rechte vorbehalten.